

---

# Guide de l'utilisateur de la loupe vidéo électronique portable ZOOMAX LUNA 6 6 pouces

---

**ZOOMAX**

Loupe vidéo électronique portable ZOOMAX LUNA 6 6 pouces



## Introduction


Veillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur. Ce guide vous aidera à mieux comprendre les fonctionnalités de Luna 6. Nous cherchons constamment à améliorer nos produits. Par conséquent, il est possible que ce guide ne soit pas la dernière version disponible. Vous pouvez télécharger le dernier guide de l'utilisateur dans la section Assistance technique sur [www.zoomax.com](http://www.zoomax.com).



## Sécurité et entretien

Pour maintenir Luna 6 dans un état optimal :



- Pour éviter tout risque d'incendie, n'exposez pas Luna 6 à une chaleur excessive ou à la lumière directe du soleil.
- Utilisez le Luna 6 dans des environnements où la température est comprise entre 10°C et 40°C (50°F et 104°F).
- Pour éviter tout risque de dommages électriques, éloignez Luna 6 des liquides et des produits chimiques. 
- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'essayez pas de démonter l'appareil. Veuillez adresser les demandes de service à Zoomax ou à un centre de réparation agréé.
- Débranchez toujours le Luna 6 avant de le nettoyer. Utilisez un


chiffon de nettoyage ou un chiffon doux amp chiffon pour nettoyer l'extérieur. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de matériaux abrasifs, car ils endommageraient votre téléagrandisseur.

## Apprenez à connaître la Luna 6

### Qu'y a-t-il dans la boîte

Vous trouverez les éléments suivants dans la boîte du Luna 6 :

### Description générale

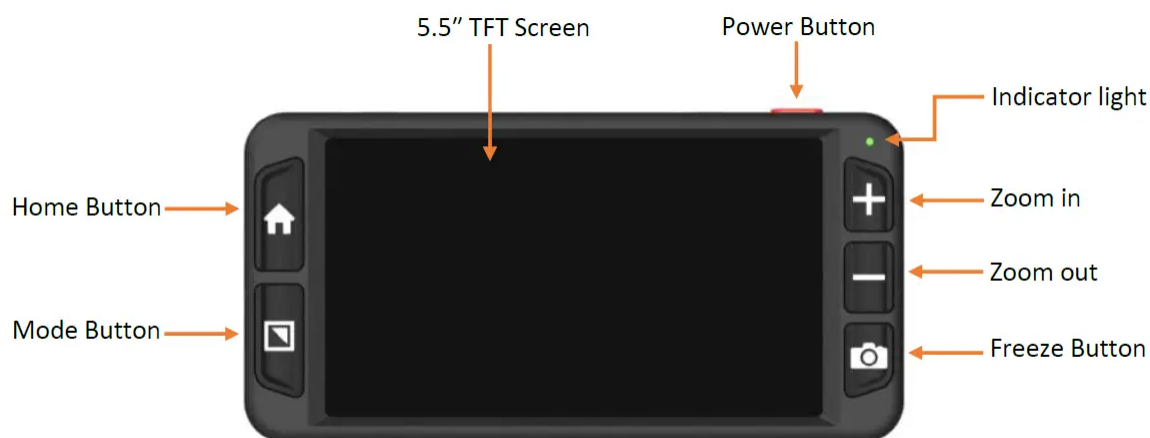



## **Charger la batterie**

La batterie DOIT être complètement chargée avant la PREMIÈRE utilisation avec l'adaptateur secteur fourni. Il existe deux méthodes de charge : la charge sans fil et la charge filaire.

## **Fonctionnement de base**

### **Ouvrir la poignée**

Faites pivoter la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre à l'arrière du Luna 6. De 0° à 180°, la poignée peut rester dans n'importe quelle position. Ouvrez la poignée selon l'illustration de la figure ci-dessous.



### **Marche / arrêt**

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer le Luna 6. Vous pouvez éteindre l'appareil de la même manière. L'appareil s'éteindra automatiquement après 3 minutes d'inactivité. Vous pouvez désactiver cette fonction d'économie d'énergie dans les paramètres système. Veuillez vous référer à la section "Activation/désactivation de l'économie d'énergie" à la page 18.

### **Proche/distance-view**

Ouvrez ou fermez la poignée pour basculer entreview et Distance-view Mode. Lorsque la poignée est fermée, le Luna 6 est en mode Proche-view Mode. Lors de l'ouverture de la poignée, Luna 6 passera à distance viewING.

**Conseils:** Par défaut, la caméra est autofocus. Lorsque l'appareil photo perd la mise au point, vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton Mode et le bouton Freeze simultanément pour refaire la mise au point.



### **Contrôle du zoom**

Appuyez sur le bouton Zoom avant pour augmenter le grossissement et appuyez sur le bouton Zoom arrière pour

diminuer le grossissement.



### **Sélectionnez le mode couleur**

Les modes de couleur incluent toutes les couleurs et 10 combinaisons de couleurs à contraste élevé : blanc/noir, noir/blanc, jaune/noir, noir/jaune, blanc/bleu, bleu/blanc, vert/noir, noir/vert, bleu/jaune et jaune/bleu. Vous pouvez choisir votre mode de couleur préféré dans les paramètres du menu principal. Veuillez vous référer à la section "Mode couleur" à la page 15. Appuyez sur le bouton Mode pendant 1 seconde en mode couleur à contraste élevé pour passer rapidement en mode couleur.

### **Figurer une image**

Appuyez sur le bouton Geler pour capturer une image. Appuyez sur les boutons Zoom avant ou Zoom arrière pour modifier le niveau de grossissement d'une image figée, ou sur le bouton Mode pour changer les couleurs.

### **Panoramique**

Vous pouvez utiliser la fonction de panoramique pour effectuer un panoramique des images agrandies en les déplaçant verticalement et horizontalement dans la zone d'affichage pour view zones spécifiques de l'image. Après avoir capturé une image, appuyez sur le bouton Zoom avant pour l'agrandir. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Accueil avec l'un des boutons Geler/Mode/Zoom arrière/Zoom avant pour déplacer l'image vers le haut/bas/gauche/droite respectivement. Appuyez brièvement sur ces boutons pour déplacer l'image un peu à la fois, ou maintenez les boutons enfoncés pour effectuer un panoramique en continu.



## **Enregistrer une image**


Appuyez simultanément sur le bouton Geler et sur le bouton Zoom avant pour enregistrer l'image gelée. Une icône coche/vérification apparaîtra sur l'écran indiquant que l'image a été enregistrée.

Si « la mémoire est pleine » s'affiche à l'écran, cela signifie que la mémoire est pleine et que certaines photos doivent être supprimées si vous souhaitez en enregistrer de nouvelles.

## **Opération avancée**


### **Menu principal**

En temps réel view, appuyez brièvement sur le bouton Accueil pour activer le menu principal. Il y a 8 options dans le menu principal : Galerie, Lumières LED, Son activé/désactivé, Luminosité de l'écran, Intensité du contraste, Mode couleur, Ligne de lecture et masques et Paramètres système. Pour sélectionner une option dans le menu, déplacez le bouton Zoom avant/arrière pour parcourir les icônes, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer. Appuyez sur le bouton Freeze pour revenir en arrière. Appuyez sur le bouton Accueil pour revenir au temps réel view directement.

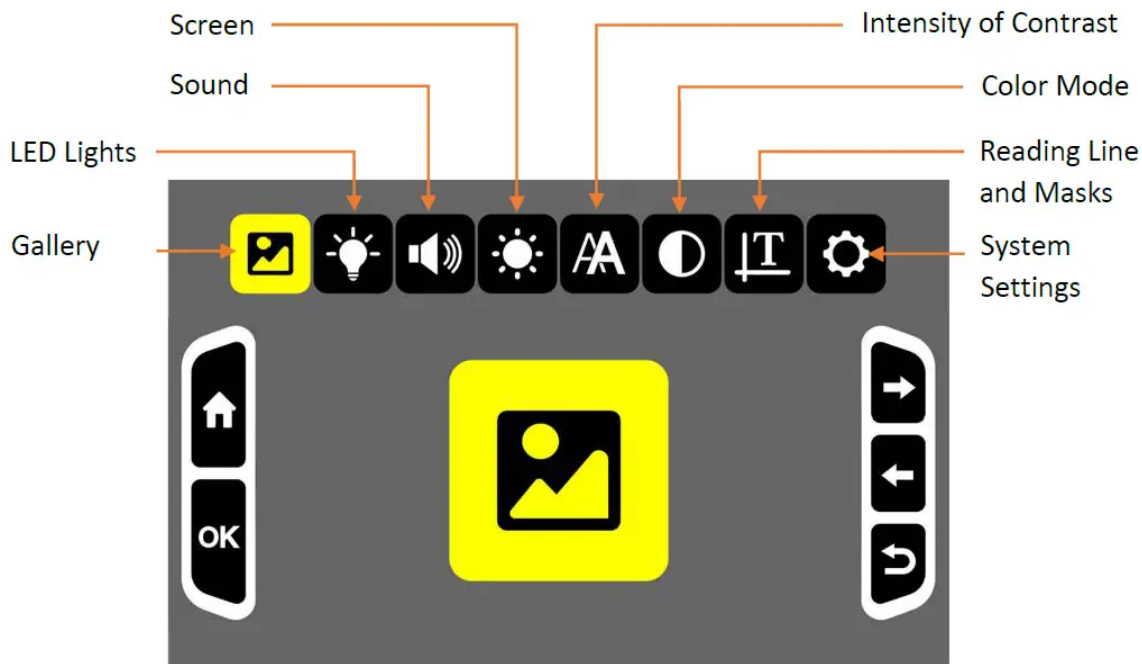

## Galerie



Dans la galerie , appuyez sur les boutons Zoom avant/arrière pour faire défiler les images, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer et view l'image sélectionnée. Vous pouvez changer le mode couleur en appuyant sur le bouton Mode, ou view détails de l'image à l'aide de la fonction panoramique. Veuillez vous référer au chapitre 4.6.2 à la page 10, section « Panoramique ». Appuyez simultanément sur les boutons Geler et Zoom arrière pour supprimer l'image. Appuyez sur le bouton Freeze pour revenir en arrière.

## Lumières LED

Choisissez cette option pour allumer et éteindre les lumières LED. Dans le paramètre Lumière LED, appuyez sur le bouton Zoom avant/arrière pour choisir entre deux options. Appuyez sur le bouton Mode pour confirmer.



Par défaut, les deux voyants LED sont allumés.

## **Son**

Choisissez cette option pour définir le son du système. Dans le réglage Son, appuyez sur les boutons Zoom avant/arrière pour choisir entre « son activé » ou « son désactivé », et appuyez sur le bouton Mode pour confirmer. Le son est activé par défaut.

## **Luminosité de l'écran**

Choisissez cette option pour régler la luminosité de l'écran. Dans le paramètre Luminosité de l'écran, appuyez sur les boutons Zoom avant/arrière pour modifier la luminosité de l'écran, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer.

## **Intensité du contraste**

La netteté du texte en mode couleur à contraste élevé peut être affectée par les conditions d'éclairage et le matériel de lecture lui-même. Luna 6 vous permet de modifier l'intensité de la couleur de contraste pour garantir la meilleure expérience de lecture. Dans le paramètre Intensité du contraste, appuyez sur les boutons Zoom avant/arrière pour modifier l'intensité, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer. En temps réel view, vous pouvez utiliser un raccourci pour régler l'intensité : maintenez le bouton Mode enfoncé et appuyez brièvement sur le bouton Zoom avant/arrière pour augmenter/diminuer le niveau d'intensité.

**REMARQUE:** Avant d'entrer dans le réglage de l'intensité du contraste, assurez-vous que le view est en couleur à contraste élevé. L'ajustement ne fonctionnera pas si le temps réel view est en mode couleur.

## **Mode couleur**

Dans le paramètre Mode couleur, vous pouvez masquer les


couleurs à contraste élevé que vous n'utilisez pas souvent. Appuyez sur le bouton Zoom avant/arrière pour vous déplacer entre les couleurs. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner ou désélectionner un mode couleur spécifique. Une barre oblique sur une icône signifie que le mode couleur choisi est masqué. Une fois que c'est fait, appuyez sur le bouton Freeze ou le bouton Home pour quitter.

### **Ligne de lecture ou masques**

Dans le paramètre Ligne de lecture ou Masques, appuyez sur le bouton Zoom avant/arrière pour faire défiler cinq lignes de lecture et options de masque. Une fois que c'est fait, appuyez sur le bouton Freeze ou le bouton Home pour quitter. En temps réel view, vous pouvez également appuyer sur les boutons Zoom avant et Zoom arrière pour activer la ligne de lecture et les masques. Maintenez le bouton Accueil enfoncé et appuyez simultanément sur le bouton Zoom avant/Zoom arrière pour régler la position de la ligne ou la largeur des masques de lecture.

### **Les paramètres du système**

Paramètres système est la dernière option du menu principal. Il est recommandé de consulter votre fournisseur pour les paramètres du système.

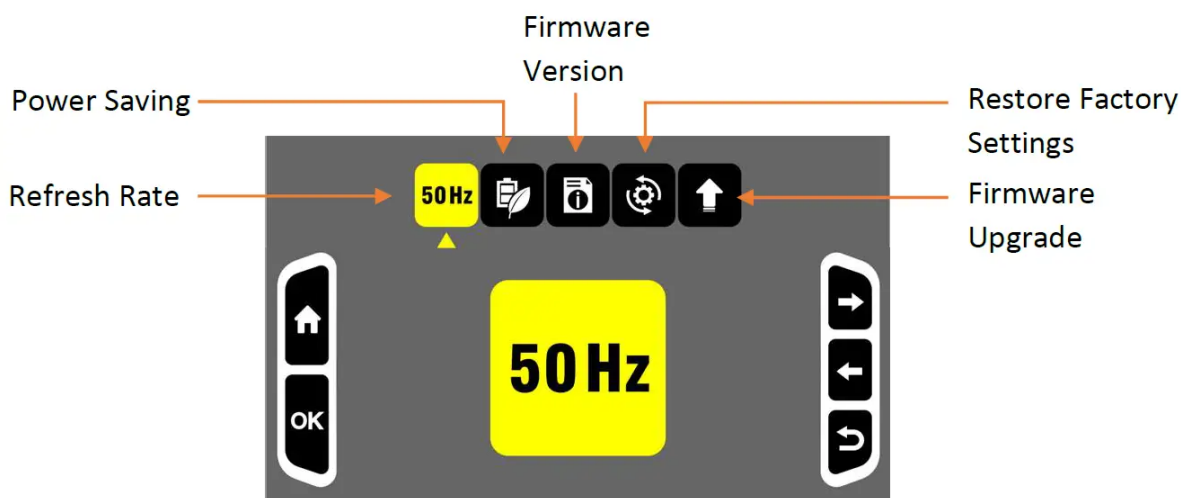

---

Pour sélectionner une option dans les paramètres système, déplacez le bouton Zoom avant/arrière pour faire défiler les icônes, puis appuyez sur le bouton Mode pour confirmer. Appuyez sur le bouton Freeze pour revenir en arrière ou sur le bouton Home pour quitter.

### **Verversingsnelheid**

Pour modifier le taux de rafraîchissement, choisissez l'icône 60 Hz/50 Hz (elle affichera 60 Hz ou 50 Hz) et appuyez sur le bouton Mode pour accéder aux paramètres. Appuyez sur le bouton Zoom avant/arrière pour choisir entre les 2 options. Le taux de rafraîchissement par défaut est de 60 Hz.

### **Economie d'énergie**

Par défaut, Luna 6 s'éteindra automatiquement après 3 minutes d'inactivité. Pour activer ou désactiver l'économie d'énergie, utilisez le bouton Zoom avant/arrière pour choisir entre 2 options dans le paramètre Économie d'énergie. Une fois cette fonction désactivée, le Luna 6 restera allumé jusqu'à ce qu'il soit à court de batterie.

### **Version du firmware**

Cette option affiche la version logicielle de Luna 6.

### **Rétablir les paramètres d'usine**

Utilisez cette fonction pour restaurer les paramètres d'usine de Luna 6.

### **firmware Upgrade**

À l'usage exclusif du service/distributeur Zoomax.

### **Autres fonctions**

## Transferts Fileavec PC

FileLes fichiers stockés dans Luna S peuvent être transférés vers l'ordinateur Windows® via le câble USB fourni. Avant de transférer les images, veuillez allumer Luna 6 et votre ordinateur.

Connectez-les avec le câble USB fourni.



Pour transférer des images enregistrées dans Luna 6 vers l'ordinateur, choisissez les images dans le dossier « Luna 6 » (le chemin du dossier est : Ordinateur > Luna 6 > DCIM) et sélectionnez l'image à transférer.



**REMARQUE:** Le transfert d'images de votre ordinateur vers Luna 6 est strictement interdit.

## Connectez-vous au téléviseur ou au moniteur

À view images sur un écran plus grand, utilisez le câble HDMI fourni pour connecter Luna 6 à un téléviseur ou un moniteur HDMI. Pour la plupart des téléviseurs, il sera nécessaire de changer la source d'entrée pour view l'image de Luna 6. Une fois connecté, l'image de Luna 6 sera affichée sur votre téléviseur ou moniteur.

## Dépannage

Problème 1 : écran noir. Solutions:



- Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- Charger la batterie.
- Diminuez le niveau de grossissement ou changez le mode couleur.

Problème 2 : L'image à l'écran est sombre ou déformée. Solutions:

- Assurez-vous que l'appareil est placé à plat sur le viewmatériel éducatif.
- Assurez-vous que les lumières LED sont allumées.
- Vérifiez le niveau de luminosité de l'écran.

Problème 3 : Taches ou imperfections sur l'écran. Solution : nettoyez la caméra et l'écran avec un chiffon doux.

**Problème 4 : L'appareil est connecté à un téléviseur, mais aucune image n'apparaît sur l'écran du téléviseur.**

- Assurez-vous que le téléviseur est allumé.
- Assurez-vous que la source d'entrée sur le téléviseur est correctement définie.
- Assurez-vous que le câble HDMI est correctement connecté au téléviseur.

**Problème 5 : Un autre problème non mentionné dans ce guide ? Solutions:**

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt du système.

- Si tout le reste échoue, veuillez contacter votre distributeur Zoomax local ou l'assistance Zoomax pour obtenir de l'aide.

## Spécifications techniques

## Autres produits de ZOOMAX



Découvrez notre gamme complète de produits (loupes portables, loupes de bureau et appareils portables) en visitant

[www.zoomax.com](http://www.zoomax.com).

## ZOOMAX TECHNOLOGY CO., LIMITÉE

- 9F, Bâtiment D, Paradise Software Park,
- No.3 Xidoumen Road, district de Xihu, Hangzhou, province du Zhejiang, 310012, Chine
- Tél: + 86-571-87006308
- Fax: + 86-571-87397220
- Email: [support@zoomax.com](mailto:support@zoomax.com)
- Visitez-nous à: [www.zoomax.com](http://www.zoomax.com)

## Documents / Ressources

## Références

- [∞ Zoomax - Loupes vidéo électroniques pour basse vision](#)
- [∞ Zoomax - Loupes vidéo électroniques pour basse vision](#)

- [∞ Zoomax - Loupes vidéo électroniques pour basse vision](#)